


 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX	Entité d'application : PBP - CHU - Autres prélèvements Emetteur : PBP - P1B - VIR	IN_LAB_23_1351 Ind : 01 Page : 1/1
	INSTRUCTION	
PRELEVEMENT SALIVAIRE DU NOUVEAU-NE EN VUE D'UNE PCR CMV		

1. Prélever la salive après 24h de vie et au moins 1h après la tétée.
2. Vérifier l'absence de lait dans la bouche du nouveau-né. Si besoin éliminer le lait avec une compresse stérile. Cette étape est importante car le lait maternel peut contenir du CMV et l'analyse serait alors faussée.
3. Utiliser l'un des milieux de transport proposés ci-dessous et un écouvillon floqué.

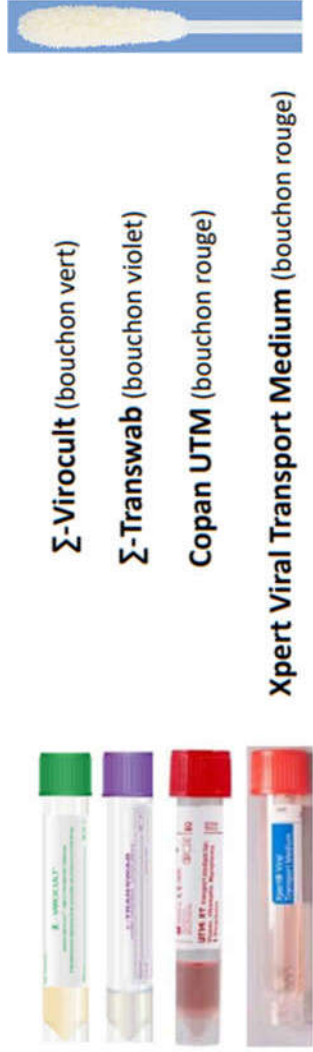

4. Appliquer l'écouvillon dans la face interne de la joue du nouveau-né pendant environ 20 à 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit imbibé de salive.
5. Insérer l'écouvillon à l'intérieur du tube dans le milieu de transport et le casser pour fermer le tube.
6. Mettre l'étiquette patient du nouveau-né sur le tube.

Date d'application : 20/03/2023

V 2023 02 17, d'après

HERPESVIRUS

TABLEAU D'APPROBATION				
POUR LE GROUPE D'ELABORATION		VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)
Nom	GARRIGUE ISABELLE	REYGNER EMILIE	CHARPENTIER ELENA	TUMIOTTO CAMILLE
Signature	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT			
				POMMIERS SYLVIE